

Tuotteen vääränlainen käyttö tai säätö saattavat johtaa tuotteen tai käyttäjän yllänsitukseen. Neuvottele aina ennen käyttöä ammattilaisen kanssa oikeanlaisen laitteen ja sinulle sopivien säätöjen valitsemiseksi.

Pidä tuotetta mahdollisimman lähellä kehoasi liikkeessäsi välttääksesi onnettomuuksia. Liiku eteenpäin rauhallisesti ja lyhyin askelin pitääksesi tasapainosi.

Kyynärsauvan pituus tulee säätää käyttäjälleen sopivaksi. Löysää hiljennyskiristintä (1) ennen säätämistä kääntämällä sitä vastapäivään. Irroita pikalukitusklipsi (2), säädä sisempi putki sopivaan korkeuteen ja paina klipsi takaisin paikalleen. Kiristä hiljennyskiristin kääntämällä myötäpäivään.



Varmista aina, että korkeussäädöt ovat kunnolla lukkiutuneet!

Varo, ettet jätä sormiasi tai muita kehon osia väliin tuotetta käsitellessäsi.

PESU ja KUIVAUS

Kyynärsauvat tulee puhdistaa miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä liinalla. Puhdistuksen jälkeen huuhtelee ne puhtaalla vedellä ja kuivaa sitten kankaalla. Tarkasta ettei vettä jää putken sisään!

Vaikeiden tahrojen poistoon suositellaan käytettäväksi rasvaa liuottavia puhdistusaineita, ph-arvo 5-9 tai 70% desinfiointiainetta. Pesulämpötila max. 80°C.



HUOM! Älä koskaan käytä öljyisiä aineita! Liukastumisvaara!

Älä käytä hankaavia puhdistusvälineitä tai – aineita, äläkä vahvoja liuottimia!

HUOLTOTOIMENPITEET

Kumitulppa tulee tarkistaa ja vaihtaa, jos se on vioittunut tai siinä on paljon kulumaa.

Poista kumitulppa vetämällä se irti putkesta. Asenna uusi kumitulppa painamalla putki tulpan pohjaan asti. Varmista aina, että kumitulpan koko ja malli on oikea!

Tarkista myös jääpiikin kunto (mikäli sovellettavissa). Varmista, että kiinnitys pitää ja ruuvit ovat tarpeeksi kireät. Tarkista, että piikki on tarpeeksi terävä. Vioittunut tai kulunut jääpiikki tulee vaihtaa uuteen.

Taipunutta tai vahingoittunutta tuotetta ei saa käyttää. Kyynärsauvaa ei saa yrittää korjata suoristamalla, sillä sen rakenne saattaa heikentyä ja se saattaa katketa.



Korjauksissa ja huolloissa on suositeltavaa käyttää vain alkuperäisvaraosia. Käyttämällä alkuperäisvaraosia varmistat CE-hyväksynnän sekä takuun voimassaolon.



2



1

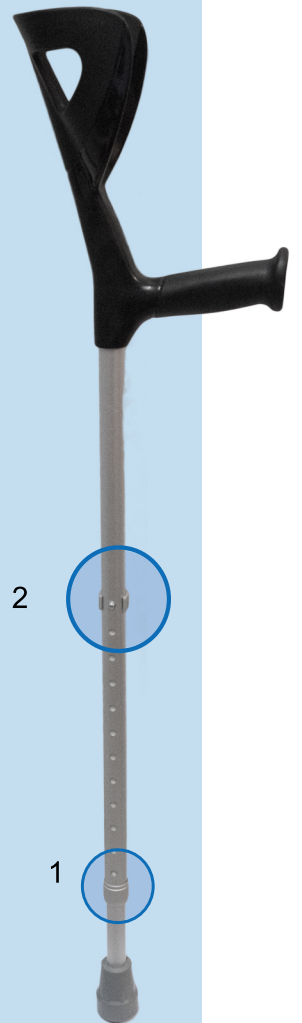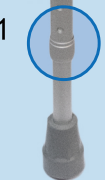

Felaktig användning eller justering av produkten kan leda till överbelastning av produkten eller användaren. Förhandla alltid med proffs före bruk för att hitta rätta produkten med passande justeringar.

Håll produkten så nära kroppen som möjligt när du flyttar för att undvika olyckor. Gå framåt lugnt och i korta steg för att hålla balansen.

Produkten måste justeras så att den passar användaren. Lossa ljuddämparen (1) genom att vrida den moturs innan justering. Koppla ur c-klippet (2), välj lämplig höjd och tryck tillbaka klippet på plats. Dra åt ljuddämparen genom att vrida den medurs.

⚠ Se alltid till att höjdjusteringen är ordentligt stängd!
Var noga med att inte lämna fingrarna eller andra kroppsdelar vid hantering av produkten.

TVÄTT och TORKNING

Rengör vid behov med ett mildt tvättmedel och en mjuk trasa. Efter rengöring, skölj dem med rent vatten och torka sedan med en trasa. Kontrollera att det inte finns vatten inuti röret.

Vid hård nedmustning kan avfettningsmedel användas, ph-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Max. tvättemperatur 80°C.

⚠ OBS! Använd inte oljiga ämnen! Använd inte slipande rengöringsmedel eller -ämnen och inte starka lösningsmedel!

UNDERHÅLL

Doppsko bör kontrolleras och bytas ut om den är skadad eller har mycket slitage.

Ta bort doppsko genom att dra ut den ur röret. Montera en ny doppsko genom att trycka ner röret hela vägen till botten av pluggen. Se alltid till att doppskos storlek och modell är korrekt!

Kontrollera även isdubbs skick (om tillämpligt). Se till att fästet håller och skruvarna är tillräckligt åtdragna. Kontrollera att isdubb är tillräckligt vass. En skadad eller sliten isdubb måste bytas ut mot en ny.


En böjd eller skadad produkt får inte användas. Försök inte reparera produkten genom att räta ut den, eftersom dess struktur kan försvagas och den kan gå sönder.

Endast ursprungliga reservdelar skall användas i reparation. Genom att använda ursprungliga reservdelar kan CE-markeringens och garantins giltighet försäkras.



2

1

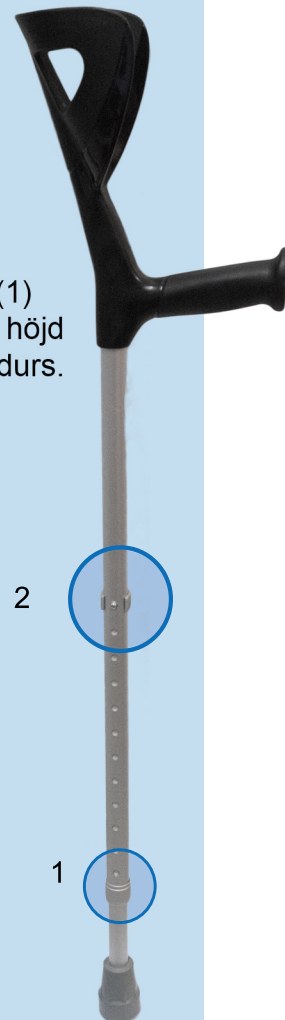

INSTRUCTIONS FOR USE

Crutch Tyke

340154 | 340154-JP
340154L | 340154L-JP
340154P | 340154P-JP

Improper use or adjustment of the product may lead to overstraining the product or the user. Always consult a professional before use to select the right type of device and adjustments for you.

Keep the product as close to your body as possible when moving to avoid accidents. Move forward calmly and in short steps to maintain balance.

The length of the crutch should be adjusted to suit the user. Before adjusting, loosen the silencer (1) by turning it counterclockwise. Remove the quick release clip (2), adjust the inner tube to the appropriate height and press the clip back into place. Tighten the silencer by turning clockwise.



Always make sure that the height adjustments are properly locked!

Be careful not to pinch your fingers or other body parts when handling the product.

WASHING and DRYING

The crutch should be cleaned with a mild detergent and a soft cloth. After cleaning, rinse it with clean water and then dry with a cloth. Check that no water remains inside the tube!

To remove stubborn stains, it is recommended to use grease-dissolving detergents, pH value 5-9, or 70% disinfectant. Washing temperature max. 80°C.



NOTE! Never use oily substances! Risk of slipping!

Do not use abrasive cleaning tools or substances, or strong solvents!

MAINTENANCE

The rubber plug should be checked and replaced if it is damaged or shows significant wear.

Remove the rubber plug by pulling it off the tube. Install the new rubber plug by pressing the tube all the way into the plug. Always make sure that the rubber plug is the correct size and model!

Also check the condition of the ice spike (if applicable). Make sure that the attachment is secure and the screws are tight enough. Check that the spike is sharp enough. A damaged or worn ice spike should be replaced with a new one.

A bent or damaged product must not be used. Do not attempt to repair the crutch by straightening it, as its structure may weaken and it may break.

It is recommended to use only original spare parts for repairs and maintenance. By using original spare parts, you ensure CE approval and the validity of the warranty.



2

1

