

PYÖRÄLLINEN SUIHKUTUOLI SIIRI

**SIIRI DUSCHSTOL MED HJUL
SIIRI SHOWER CHAIR WITH WHEELS**

345310 | 345312 | 345312V | 345312W

345305 | 345300W | 345305W

345315 | 345316 | 345315W | 345316W

345412W



Copyright Tukimet Oy
versio 2/2025



FI

** Säilytä ohjekirja myöhempää tarvetta varten **

Tekniset tiedot, yleiset turvallisuusohjeet & puhdistus

Siiri suihkupyörätuoli, kuljetusmalli

345310

Siiri suihkupyörätuoli, korkeussäädettävä kuljetusmalli

345312 | 345312V | 345312W

Siiri suihkupyörätuoli XXL, korkeussäädettävä kuljetusmalli

345412W

Siiri suihkupyörätuoli, kallistettava kork. sääd. kuljetusmalli

345315 | 345316 | 345315W | 345316W

Siiri suihkupyörätuoli, omatoiminen

345305 | 345305W | 345300W

Verkkoselkänöjan asennus

Lisävarusteita ja varaosia / Reservdelslista & extrautrustning

SE

** Förvara bruksanvisningsboken för senare bruk **

Teknisk information, allmänna säkerhetsanvisningar & rengöring

Siiri duschstol med hjul, transportmodell

345310

Siiri duschstol med hjul, höjjusterbar transportmodell

345312 | 345312V | 345312W

Siiri duschstol XXL med hjul, höjjusterbar transportmodell

345412W

Siiri duschstol med hjul, lutbar & höjjusterbar modell

345315 | 345316 | 345315W | 345316W

Siiri duschrullstol, oberoende modell

345305 | 345305W | 345300W

Montering av textilryggstöd

EN

** Store the manual for future reference **

p. 19 ->

Tuotteidemme käyttöohjeet löydät myös täältä:

www.tukimet.fi/ohjekirjat

Katso asennusvideot YouTubessa:



** Huomioithan, että ohjekirjan kuvat ovat vain suuntaa-antavia ja saattavat sisältää eroavaisuuksia oikeaan tuotteeseen nähden.*

**Lue tämä ohjekirja huolellisesti ja noudata asennusohjetta.
Huolellinen asennus takaa turvallisen käytön.**

Älä käytä tätä laitetta, ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöohjeen. Jos et ymmärrä varoituksia ja ohjeita, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jälleenmyyjään tai tekniseen henkilöstöön ennen tämän laitteen käyttämistä välttääksesi loukkaantumisen tai vaurion syntymisen. Neuvottele aina ennen käyttöä ammattilaisen kanssa oikeanlaisen laitteen ja sinulle sopivien säätöjen valitsemiseksi.

Tekniset tiedot

Käyttötarkoitus: Siiri -pyörällinen suihkutuoli on kätevä apu suihkutiloissa. Hygieniastuimellinen, pyörällinen suihkutuoli on laadukas ja vastaa niin yksityishenkilöiden kuin osastonkin tarpeita. Laadukas polyuretaani istuin kestää kulutusta ja tuntuu miellyttävältä iholla. Istuin tulee irrotettavan kannen kanssa. Siirin saa laitettua pienempään tilaan irrotettavan selkänöjan ansiosta. Käsinojat voidaan kääntää ylös ja jalkatuet voidaan siirtää sivuille.

- Runko valkoiseksi maalattua alumiinia (ruostumaton)
- Istuin, käsinojat ja selkänöja mustaa polyuretaania
- Irrotettava selkänöja ja ylöskäännettävät käsinojat
- Korkeussäädettävät sivuille kääntyvät ja helposti irrotettavat jalkatuet
- Kannellinen bideaukko
- Alusastia kannella ja kiskot
- Lukittavat pyörät edessä ja takana
- CE-merkitty lääkinällinen laite

Yleiset turvallisuusohjeet:

- ⚠ - Vältä laittamasta sormeasi tai muita kehon osia paikkoihin, joissa ne saattavat jäädä puristuksiin.
- ⚠ - Käyttölämpötila välillä -30°C ja 40°C (käsittele hyvin kuumassa tai kylmässä paikassa ollutta laitetta varovasti niin, ettet loukkaa itseäsi)
- ⚠ - Henkilökuljetuksen aikana alusastia on pidettävä paikallaillaan. Alusastian puuttuessa, kansi saattaa irrota.
- ⚠ - Älä tee rakenteellisia säätöjä tai muutoksia laitteeseen.
- ⚠ - Tarkista kiinnikkeiden kireys säännöllisin välein. **Huollata viallinen laite!**

Korjauksissa ja huolloissa tulee käyttää vain alkuperäisvaraosia. Käyttämällä alkuperäisvaraosia varmistat CE-hyväksynnän sekä takuun voimassaolon.

Puhdistus: Suihkutuoli tulee puhdistaa säännöllisesti miedolla puhdistusaineella (PH 8-12) ja pyyhkiä kostealla pehmeällä liinalla. Vaikeiden tahrojen poistoon suositellaan käytettäväksi rasvaa liuottavia puhdistusaineita. Alkoholipohjaiset desinfiointiaineet tulee laimentaa suhteessa 1:4. Suihkutuoli voidaan asettaa matalalla paineella juoksevan veden alle tai suihkutella puhtaaksi. Älä käytä rajusti hankaavia materiaaleja tai valkaisuaineita välttääksesi kulumisen ja värin haalenemisen. Istuinosa ja alusastia voidaan pestä koneessa 85 asteessa korkeintaan 1 minuutin ajan. Suihkutuoli voidaan desinfioida koneellisesti.

⚠ **Älä koskaan käytä öljyisiä aineita! Pinnasta tulee liukas ja ote ei pidä!**

Siiri suihkupyörätuoli, kuljetusmalli

- Etu- ja takarenkaat 125 x 30 mm
- Kokonaisleveys: 57 cm
- Kokonaiskorkeus: 100 cm
- Bideaukon koko: 19,5 cm x 26,5 cm
- Istuimen koko: 43 x 45 cm
- Istuin korkeus: 53 cm
- Istuin leveys: 46 cm
- Paino: 13 kg
- Käyttäjän max. paino: 180 kg



Käyttöönotto:

Poista kaikki tuotteen osat pakkauksesta.

Aseta selkänöja sisään takaosan putkiin, valitse sopiva korkeus ja kiristä käsipyörillä (kuva 1).



kuva 1

Asenna jalkatuet: tuen ylin kiinnike painetaan alas sisään rungon putkeen, niin että jalkalauta on sivuttain runkoon nähden (kuva 2).



kuva 2

Seuraavaksi kiepsautetaan jalkatuki keskustaan päin kunnes se lukkiutuu paikalleen ja kuuluu "klik" ääni (kuva 3).



kuva 3

Sama toistetaan toisella jalkatuella.

Jalkalautojen korkeutta voi säätää ilman työkaluja käsipyörän avulla (kuva 4).



kuva 4

Jalkalaudan saa vapautettua ja irrotettua painamalla vipua (kuva 5).



kuva 5

Siiri suihkupyörätuoli, korkeussäädettävä kuljetusmalli

345312 | 345312V

- Etu- ja takarenkaat 125 x 30 mm
- Kokonaisleveys: 57 cm
- Kokonaiskorkeus: 99 cm - 105 cm
- Bideaukon koko: 19,5 cm x 26,5 cm
- Istuimen koko: 43 x 45 cm
- Istuin korkeus: 49 - 55 cm
- Istuin leveys: 46 cm
- Paino: 13 kg
- Käyttäjän max. paino: 150 kg

345312W

- Etu- ja takarenkaat 125 x 30 mm
- Kokonaisleveys: 66 cm
- Kokonaiskorkeus: 97 cm - 103 cm
- Bideaukon koko: 19,5 cm x 26,5 cm
- Istuimen koko: 56 x 42 cm
- Istuin korkeus: 49 - 54 cm
- Istuin leveys: 57 cm
- Paino: 17 kg
- Käyttäjän max.paino: 200 kg

Käyttöönotto:

Poista kaikki tuotteen osat pakkauksesta. Asenna renkaat tuolin jalkojen putkiin, säädä korkeus sopivaksi ja lukitse pikalukitusklipsillä (kuva 1).



kuva 1

Laitteessa on kolme korkeusvaihtoehtoa (kuva 2).



kuva 2

⚠ HUOM! Renkaan säätöputken ylintä reikää ei saa asentaa rungon alimpaan reikään (kuva 3). Korkeampaa istuinkorkeutta varten lisävarusteena on saatavilla renkaan pidempi säätöputki (kts. sivu 8).



kuva 3

⚠ Tarkista, että klipsi menee tiukasti kiinni!

Pakkauksesta löytyy vaihtoehtoisesti myös kiinnityspultit renkaiden pysyvämpään asennukseen (kuva 4).

Aseta selkänoja sisään takaosan putkiin, valitse sopiva korkeus ja kiristä käsipyörillä (kuva 5).



kuva 4

Asenna jalkatuet (katso kuvat edelliseltä sivulta): tuen ylin kiinnike painetaan alas sisään rungon putkeen, niin että jalkalauta on sivuttain runkoon nähden. Seuraavaksi kiepsautetaan jalkatuki keskustaan päin, kunnes se lukkiutuu paikalleen ja kuuluu "klik" ääni. Sama toistetaan toisella jalkatuella. Jalkalautojen korkeutta voi säätää ilman työkaluja käsipyörän avulla. Jalkalaudan saa vapautettua ja irrotettua painamalla vipua.



kuva 5

Siiri suihkupyörätuoli XXL, korkeussäädettävä kuljetusmalli

- Etu- ja takarenkaat 125 x 65 mm
- Kaksoisjarrutoiminto, joka lukitsee sekä pyörän että kääntölaakerin
- Kokonaisleveys: 71 cm
- Kokonaiskorkeus: 95 cm - 100 cm
- Bideaukon koko: 19 cm x 41 cm
- Istuimen koko: 56 x 50 cm
- Istuin korkeus: 48 - 53 cm
- Istuin leveys: 61,5 cm
- Paino: 19 kg
- Käyttäjän max. paino: 270 kg



Käyttöönotto:

Katso tuotteen "Siiri suihkupyörätuoli, korkeussäädettävä kuljetusmalli" ohjesivulta ohjeet renkaiden, selkänojan ja jalkalautojen asennukseen.



kuva 1

⚠ HUOM! Renkaan säätöputken ylintä reikää ei saa asentaa rungon alimpaan reikään (kuva 1). Korkeampaa istuinkorkeutta varten lisävarusteena on saatavilla renkaan pidempi säätöputki.

Käsinoja on lukittuna ala-asentoon. Jotta käsinojan saa vapautettua ja nostettua ylös, tulee vetää punaisesta nupista (kuva 2).



kuva 2

Kun käsinoja halutaan ottaa taas käyttöön, painetaan noja alas (kuva 3).

⚠ Tarkista, että käsinoja lukkiutuu!



kuva 4

Kaikki neljä rengasta ovat lukittavissa kaksoisjarrutoiminnolla. Kun sininen vipu painetaan alas, rengas lukkiutuu ja vapautuu vivun takaisin ylös nostamalla (kuva 4). Tuuilta noustessa ja siihen istuessa tulisi kaikkien neljän renkaan olla aina lukittuna!



kuva 3

Siiri suihkupyörätuoli, kallistettava, korkeussäädettävä kuljetusmalli

345315 | 345316

- Etu- ja takarenkaat 125 x 30 mm
- Kokonaisleveys: 57 cm
- Kokonaiskorkeus: 100 cm - 106 cm
- Kallistuskulmat: eteen 50° / taakse 30°
- Bideaukon koko: 19 cm x 36 cm
- Istuimen koko: 43 x 45 cm
- Istuin korkeus: 55 cm - 59 cm
- Istuin leveys: 46 cm
- Paino: 14 kg
- Käyttäjän max. paino: 130 kg

345315W | 345316W

- Etu- ja takarenkaat 125 x 30 mm
- Kokonaisleveys: 66 cm
- Kokonaiskorkeus: 100 cm - 106 cm
- Kallistuskulmat: eteen 50° / taakse 30°
- Bideaukon koko: 19 cm x 36 cm
- Istuimen koko: 56 x 51 cm
- Istuin korkeus: 55 - 60 cm
- Istuin leveys: 57 cm
- Paino: 19,5 kg
- Käyttäjän max.paino: 200 kg

Käyttöönotto:

Katso tuotteen "Siiri suihkupyörätuoli, korkeussäädettävä kuljetusmalli" ohjesivulta ohjeet renkaiden, selkänöjan ja jalkalautojen asennukseen.

Aseta niskatuki sisään työntökahvan keskellä olevaan mustaan kannattimeen, säädä sopivaan korkeuteen ja kiristä käsipyörällä (kuva 1 & 2).

Ylemmällä käsipyörällä säädetään niskatuen etäisyyttä (kuva 3).

Kallistaminen:

Kallistuskulmaa saadaan säädettyä tuolin takaa löytyvästä kahvasta (kuva 4)

Purista kahvaa: jännite vapautuu ja tuolin kallistusta voidaan säätää. Irrota kahvasta kun tuoli on halutussa asennossa. Asento lukkiutuu.

⚠ Jos käyttäjä istuu tuolissa yksinään pidemmän aikaa, tulee pyörät lukita niin, että ne osoittavat pois päin tuotteesta ja antavat näin paremman pidon.



kuva 1



kuva 2



kuva 3



kuva 4

Siiri suihkupyörätuoli, omatoiminen

345305, korkeussäädettävä

- Takarenkaat 24" polyuretaania
- Eturenkaat 125 x 30 mm
- Kokonaisleveys: 65 cm
- Kokonaiskorkeus: 97 - 102 cm
- Bideaukon koko: 19 cm x 36 cm
- Istuimen koko: 43 x 45 cm
- Istuin korkeus: 49 - 55 cm
- Istuin leveys: 46 cm
- Paino: 17 kg
- Käyttäjän max.paino 130 kg

345300W | 345305W, kork. sääd.

- Takarenkaat 24" polyuretaania
- Eturenkaat 125 x 30 mm
- Kokonaisleveys: 74 cm
- Kokonaiskorkeus: 100 cm | 97-102,5 cm
- Bideaukon koko: 19 cm x 36 cm
- Istuimen koko: 56 x 42 cm
- Istuin korkeus: 53 cm | 49-55 cm
- Istuin leveys: 57 cm
- Paino: 18 kg
- Käyttäjän max.paino: 200 kg

Käyttöönotto:

Poista kaikki tuotteen osat pakkauksesta. Aseta selkänöja sisään takaosan putkiin, valitse sopiva korkeus ja kiristä käsipyörillä (kuva 1).

Asenna jalkatuet (katso tarkemmat ohjeet tuotteen "Siiri suihkupyörätuoli, kuljetusmalli" ohjesivulta).

Takarenkaiden jarru:

Lukitse takarenkaat painamalla jarruvipua alaspäin kunnes se napsahtaa (kuva 2).

Mallin 345305 / 345305W korkeussäätö:

Eturenkaan korkeutta säädetään irrottamalla pikalukitusklipsi, valitsemalla haluttu korkeus ja kiinnittämällä pikalukko takaisin paikoilleen.

⚠ Tarkista, että klipsi menee tiukasti kiinni!

Takarenkaiden korkeussäätö suoritetaan akselipaikkaa vaihtamalla (kuvat 4-6).



kuva 1



kuva 2



kuva 3



kuva 4



kuva 5



kuva 6

Verkkoselkänöjan asennus

Lisävarusteena saatava verkkoselkänöja 345202 voidaan asentaa kaikkiin normaalilevyisiin Siiri suihkupyörätuoleihin (mallit, joiden istuimen koko 43 x 45 cm) ja verkkoselkänöja 345202W Siiri-malleihin 345312W ja 345315W.

Poista ensin kovempi pehmusteosa selkäosan rungosta avaamalla 4 ristipäistä ruuvia.

Aseta sitten verkkoselkänöja selkäosan runkoon niin, että soljet tulevat tuolin takapuolelle ja alin solkinauha kulkee käsinojien alta ja keskimäinen niiden päältä (selkänöjassa on kolot käsitukia varten).

Pujota jokaisen kolmen solkinauhan toinen pää soljen läpi. Kiristä haluttuun asentoon ja kiinnitä painamalla tarranauhat yhteen (kuva 1).

Verkkoselkänöjan yläreunassa on kaksi ohuempaa kiinnitysnauhaa, joilla verkkoselkänöjan alaspäin valuminen estetään.

Tavallisissa kuljetusmalleissa sekä omatoimisessa Siirissä nauhat vedetään ristiin ja kiinni keskimäisen solkinauhan välissä olevaan tarranauhaan (kuva 2).

Kallistettavaan Siiriin asentaminen:

Aseta molemmat nauhat roikkumaan takaputken yläosan ylitse (kuva 3).

Vedä vasen nauha pääntuen kiinnikkeen alapuolelta (kuva 4). Aseta silmukka-alue koukkualueen päälle ja kiinnitä toisiinsa (kuva 5).

Vedä oikea nauha pääntuen kiinnikkeen alapuolelta ja vasemman nauhan päältä (kuva 6). Aseta silmukka-alue koukkualueen päälle ja kiinnitä toisiinsa (kuva 7).

Näin asennettuna selkänöja pysyy tarpeeksi kireällä eikä valu alas tai paina vasten pääntuen käsipyörää (kuva 8).



kuva 1



kuva 2



kuva 3



kuva 4



kuva 5



kuva 6



kuva 7



kuva 8

Varaosaluettelo / Reservdelista:

Tarkemman huolto-ohjeen ohessa listattujen kuluvien osien vaihtamiseksi voi pyytää asiakaspalvelustamme: tukimet@tukimet.fi

HUOM! Huollon ja osien vaihdon tulee suorittaa vain asiaan perehtynyt ammattilainen!



Nimike:
Tuotekoodi:

1	Korkeussääd. etu/takapyörä (XXL-malli)	345209(HD)
2	Jalkalauta täydellinen	345207
3	Jalkalauta varrella	345207V
4	Alusastia	345211
5	Istuinaukon suojuus	345213
6	Istuin (EXW-malli XXL-mallit)	345214(W HD-12/-15)
7	Selkänoja ja käsinojat	345215
8	Päätuiki täydellinen	345216
9	Kaasujousi (EXW)	345217(W)
10	Kaasujousen vaijeriseti (2 x vaijeri, 1 x jarrukahva + ruuvit)	345222
11	Siiri omatoiminen, pikalukituspyörä & tarv.	345203
12	Siiri omatoiminen, takapyörä & tarvikkeet	345204
13	Etupyörä 125 mm (ei jarrua)	345205E
14	Takapyörä 125 mm jarrulla	345206
15	Etupyörä 125 mm jarrulla	345206E
16	Verkkoselkänoja (EXW)	345202(W)


Titel:
Produktkod:

1	Höjdjusterbar fram-/ bakhjul (XXL)	345209(HD)
2	Komplett fotstöd	345207
3	Fotstöd med stav	345207V
4	Bäcken	345211
5	Skydd för sittsöppningen	345213
6	Sittplats (EXW XXL)	345214(W HD-12/-15)
7	Ryggstöd och armstöd	345215
8	Komplett nackstöd	345216
9	Gasfjäder (EXW)	345217(W)
10	Gasfjäderkabelsats (2 x kabel, 1 x handtag + skruvar)	345222
11	Siiri oberoende, snabbfrigörhjul & förnödenh.	345203
12	Siiri oberoende, bakhjul & förnödenheter	345204
13	Framhjul 125 mm (ingen broms)	345205E
14	Bakhjul 125 mm med broms	345206
15	Framhjul 125 mm med broms	345206E
16	Textilryggstöd (EXW)	345202(W)

Lisävarusteita / Extrautrustning:
AMPUTAATIOJALKATUKI / Amputation benstöd
Tuotenumero: 345 220 vasen / vänster **345 221** oikea / höger

TURVATANKO SUIHKUPYÖRÄTUOLIIN / Säkerhetsstäng
Tuotenumero: 345 210 / 345210W
POHJEREMMI / Vadrem
Tuotenumero: 345 223
SIIRIN TURVAVYÖ / Säkerhetsbälte
Tuotenumero: 345 224
ISTUIN, ETUREUNA UMPINAINEN /
Säte, solid framkant
Tuotenumero: 345 218 / W / HD-12 / HD-15

sis. istuimen sekä kannen

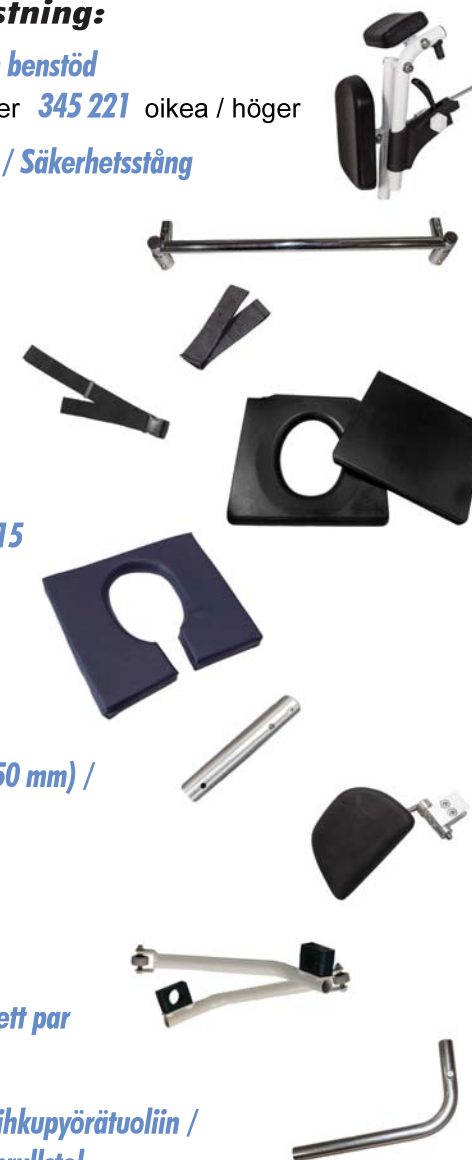ISTUINOSAN PEHMUSTE AUKOLLA /
Sätets kudde med hål
Tuotenumero: 345 227
RENKAAN PIDEMPI SÄÄTÖPUTKI (+ 50 mm) /
Hjuls längre justeringsrör (+ 50 mm)
Tuotenumero: 345 145
KYLKITUKI / Sidostöd
Tuotenumero: 345 228
KAATUMAESTEET, pari / Fallbarriärer, ett par
Tuotenumero: 345 208
KIPPAUSRAUTA Siiri omatoimiseen suihkupyörätuoliin /
Tippningsjärn för Siiri oberoende duschrullstol
Tuotenumero: 345 219


Läs den här anvisningsboken ordentligt och följ installeringsanvisningar. Aktsam installation garanterar tryggt bruk.

Använd inte produkten förrän du har läst och förstått den här bruksanvisningen. Om du inte förstår varningar och anvisningar, ta kontakt till hälsovårdspersonal, återförsäljare eller tekniska personal innan produkten används för att undvika alla slags skador. Förhandla alltid med proffs före bruk för att hitta rätta produkten med passande justeringar.

Teknisk information

Användningsändamål: Siiri duschstol med hjul är ett praktiskt hjälpmedel i duschområden. Duschstol med ett hygiensäte och hjul är högklassigt och motsvarar både privata och avdelningars behov. Högklassigt säte tillverkad av polyuretan tåler mycket slitning och känns bekvämt mot huden. Sätet levereras med ett löstagbart skydd. Siiri kan förvaras i ett mindre rum på grund av löstagbara ryggstödet. Armstöden kan också vändas upp och fotstöden kan vändas åt sidorna.

- Ram vitmålat aluminium (rostfri)
- Säte, armstöd och ryggstöd tillverkade av svart polyuretan.
- Löstagbart ryggstöd och upp vändbara armstöd
- Höjd justerbara och lätt avtagbara fotstöd som kan vändas åt sidorna
- Bidedusch hål med skydd
- Bäckben med skydd och räls
- Låsbara hjul på fram- och baksidan
- CE-märkt medicinsk utrustning

Allmänna säkerhetsanvisningar:

- ⚠ - Undvik att sätta finger eller andra kroppsdelar till platser där de kan hamna i kläm.
 - ⚠ - Brukstemperatur mellan -30°C och 40°C (handla produkten som har varit i mycket kall eller het plats aktsamt för att undvika skador)
 - ⚠ - Under PERSONTRANSPORT bäckenet skall hållas på sin plats. Ifall bäckenet saknas kan skyddet lossna.
 - ⚠ - Gör ej strukturella justeringar eller ändringar till produkten
 - ⚠ - Kolla regelbundet att fästelementen är väl spända.
- Ta felaktig produkt till underhåll!**

Ursprungliga reservdelar skall användas i underhåll och reparationer.
Ursprungliga reservdelar garanterar CE-märket och garantins giltighet.

Rengöring: Duschstolen skall rengöras regelbundet med mildt rengöringsmedel (PH 8-12) och suddas med en mjuk trasa. Fettlösande medel rekommenderas för svåra fläckar. Alkoholbaserade desinfektionsmedel skall spädas ut i relation 1:4. Duschstolen kan läggas under lågtryckrinnande vatten eller kan duschas ren. Använd ej hårt slitande materialer eller blekmedel för att undvika slitning och färgavfällning. Sätedel och bäcken kan tvättas i maskin i 85 graders temperatur högst i 1 minut. Kan desinficeras mekaniskt.

⚠ **Använd aldrig oljiga medel! Ytan blir hal och greppet håller inte!**

Siiri duschstol med hjul, transportmodell

- Fram- och bakhjul 125 x 30 mm
- Totalbredd: 57 cm
- Totalhöjd: 100 cm
- Bidehålets storlek: 19,5 x 26,5 cm
- Sätets storlek: 43 x 45 cm
- Sitthöjd: 53 cm
- Sittbredd: 46 cm
- Vikt: 13 kg
- Användarens max. vikt: 180 kg



Ibruktagande:

Ta fram alla produktdelar från packningen.

Sätt ryggstöd in i baksidans rör, välj passande höjd och spänn handskruvarna (bild 1).



bild 1

Installera fotstöden: Stödets högsta infästning pressas ner i ramens rör så att fotbrädan är i sidled med ramen (bild 2).



bild 2

Näst fotstödet vänds åt centrum tills det låser sig och man kan höra ljudet "klik" (bild 3).



bild 3

Repetera på andra sidan.

Fotbrädans höjd kan justeras utan verktyg med handskruven (bild 4).



bild 4

Fotbrädan kan lossas genom att trycka på spaken (bild 5).



bild 5

Siiri duschstol med hjul, höjddjusterbar transportmodell

345312 | 345312V

- Fram- och bakhjul 125 x 30 mm
- Totalbredd: 57 cm
- Totalhöjd: 99-105 cm
- Bidehålets storlek: 19,5 x 26,5 cm
- Sätets storlek: 43 x 45 cm
- Sitthöjd: 49-55 cm
- Sittbredd: 46 cm
- Vikt: 13 kg
- Användarens max. vikt: 150 kg

345312W

- Fram- och bakhjul 125 x 30 mm
- Totalbredd: 66 cm
- Totalhöjd: 97-103 cm
- Bidehålets storlek: 19,5 x 26,5 cm
- Sätets storlek: 56 x 42 cm
- Sitthöjd: 49-54 cm
- Sittbredd: 57 cm
- Vikt: 17 kg
- Användarens max. vikt: 200 kg

Ibruktage:

Ta fram alla produktdelar från packningen. Installera hjul i stolsbenens rör, välj passande höjd och lås med snabbblåsclips (bild 1).



bild 1

Produkten har tre höjdalternativer (bild 2).



bild 2

- ⚠ OBS! Hjulets justeringsrörs översta hål skall ej installeras i ramens lägsta hål (bild 3).** Det finns ett längre hjuls justeringsrör som extrautrustning för högre sitthöjd (kolla sidan 8).



bild 3

- ⚠ Se till att clipset låser sig ordentligt!**

Alternativt finns det också bultar för långvarigare installering av hjulen (bild 4).

Sätt ryggstödet in i baksidans rör, välj passande höjd och spänn handskruvarna (bild 5).



bild 4

Installera fotstöden (kolla bilderna från förra sidan): Stödets högsta infästning pressas ner i ramens rör så att fotbrädan är i sidled med ramen. Näst fotstödet vänds åt centrum tills det låser sig och man kan höra ljudet "klik" (bild 3). Repetera på andra sidan.

Fotbrädans höjd kan justeras utan verktyg med handskruven. Fotbrädan kan lossas genom att trycka på spaken.



bild 5

Siiri duschstol XXL med hjul, höjddjusterbar transportmodell

- Fram- och bakhjul 125 x 65 mm
- Dubbel bromsfunktion som låser både hjulet och svänglagret
- Total bredd: 71 cm
- Total höjd: 95 cm - 100 cm
- Bidöppningsstorlek: 19 cm x 41 cm
- Sitsstorlek: 56 x 50 cm
- Sitthöjd: 48 - 53 cm
- Sittbredd: 61,5 cm
- Vikt: 19 kg
- Max. användarvikt: 270 kg



Installation:

Se instruktionssidan för produkten "Siiri duschstol med hjul, höjddjusterbar transportmodell" för instruktioner om montering av hjul, ryggstöd och fotstöd.



bild 1

- ⚠ OBS! Hjulets justeringsrörs översta hål skall ej installeras i ramens lägsta hål (bild 1).** Det finns ett längre hjuls justeringsrör som extrautrustning för högre sitthöjd.

Armstödet är låst i nedfällt läge. För att frigöra och höja armstödet, dra i den röda knappen (bild 2).



bild 2

När du vill använda armstödet igen, tryck ner armstödet (bild 3).

- ⚠ Se till att armstödet låser sig!**



bild 4

Alla fyra hjulen är läsbara med dubbel bromsfunktion. När den blå spaken trycks ned läses hjulet. Den frigörs genom att lyfta spaken uppåt igen (bild 4). När du stiger av stolen och sätter dig i den ska alla fyra hjulen alltid vara låsta!



bild 3

Siiri duschstol med hjul, lutbar & höjddjusterbar transportmodell

345315 | 345316

- Fram- och bakhjul 125 x 30 mm
- Totalbredd: 57 cm
- Totalhöjd: 100-106 cm (utan nackstöd)
- Lutningsvinklar: framåt 50° / bakåt 30°
- Bidehålets storlek: 19 x 36 cm
- Sätets storlek: 43 x 45 cm
- Sitthöjd: 53-56 cm
- Sittbredd: 46 cm
- Vikt: 14 kg
- Användarens max. vikt: 130 kg

345315W | 345316W

- Fram- och bakhjul 125 x 30 mm
- Totalbredd: 66 cm
- Totalhöjd: 100-106 cm
- Lutningsvinklar: framåt 50° / bakåt 30°
- Bidehålets storlek: 19 x 36 cm
- Sätets storlek: 56 x 51 cm
- Sitthöjd: 55-60 cm
- Sittbredd: 57 cm
- Vikt: 19,5 kg
- Användarens max. vikt: 200 kg

Ibruktagande:

Kolla anvisningarna från förra sidan för installering av hjul, ryggstöd och fotbräda.

Sätt nackstöd in i svarta stödet mitt i ryckgrepp, välj passande höjd och spänn handskruven. (bilder 1 & 2)

Nackstödet avstånd justeras med högre handskruv (bild 3).

Lutning:

Lutningsvinkel kan justeras med grepp som finns bakom stolen (bild 4).

Kläm ihop handtaget: Spänningen släpps och stolens lutning kan justeras. Släpp handtaget. Ställningen låser sig.


 Ifall användaren sitter i stolen i en lång tid, skall hjulen låsas så att de pekar bort från produkten och därmed blir greppet bättre.



bild 1



bild 2



bild 3



bild 4

Siiri duschrullstol, oberoende modell

345305, höjddjusterbar

- Bakhjul 24" (polyuretan)
- Framhjul: 125 x 30 mm
- Totalbredd: 65 cm
- Totalhöjd: 97-102 cm
- Bidehålets storlek: 19 x 36 cm
- Sätets storlek: 43 x 45 cm
- Sitthöjd: 49-55 cm
- Sittbredd: 46 cm
- Vikt: 17 kg
- Användarens max. vikt: 130 kg

345300W | 345305W, höjddjusterbar

- Bakhjul 24" (polyuretan)
- Framhjul: 125 x 30 mm
- Totalbredd: 74 cm
- Totalhöjd: 100 cm | 97-102,5 cm
- Bidehålets storlek: 19 x 36 cm
- Sätets storlek: 56 x 42 cm
- Sitthöjd: 53 cm | 49-55 cm
- Sittbredd: 57 cm
- Vikt: 18 kg
- Användarens max. vikt: 200 kg

Ibruktagande:

Ta fram alla produkt delar från packningen. Sätt ryggstöd in i baksidans rör, välj passande höjd och spänn handskruvarna (bild 1).

Installera fotstöden (Kolla bättre anvisningar från "Siiri duschrullstol, transportmodell").

Bakhjulbroms:

Lås bakhjulen genom att pressa bromsspaken neråt tills den klickar (bild 2).

Höjddjustering på modell 345305 / 345305W:

Framhjulets höjd justeras genom att lossna snabbblåsclipset, välj passande höjd och installera snabbblåset tillbaka på sitt plats.

 Se till att clipset låser sig ordentligt!

Bakhjulets höjddjustering utförs genom att byta axelns plats (bilder 4-6).



bild 1



bild 2



bild 3



bild 4



bild 5



bild 6

Installering av nätryggstöd

Nätryggstöd 345202 (extrautrustning) kan installeras i alla Siiri duschrullstolar med normalt bredd (modeller som har sätestorlek 43 x 45 cm) och 345202W i modeller 345312W och 345315W.

Först ta bort hårdare del av kudden genom att öppna 4 stjärnskruvar.

Sedan sätt nätryggstöd i ryggdelens ram så att spännen finns bakom stolen och lägsta spännerem går under handstöden och mellersta rem går över handstöden (det finns hål i ryggstödet för handstöden).

Träd alla tre remmar genom sina spännen. Spänn till passande ställning och tryck ihop kardborrebanden (bild 1).

Nätryggstödet övre kant har två tunnare infästningsremmar som förebygger att nätryggstödet inte börjar sjunka.

I vanliga transportmodeller samt oberoende Siiri remmar dras kors över varandra och fastgörs vid kardborrebandet i mellersta spännerem (bild 2).

Lutbar Siiri duschstol:

Lägg båda remmar på bakrörs överdel i hängande position (bild 3).

Ta vänstra remmen under huvudstöds infästning (bild 4). Lägg slutna krets på kroken och fastgör vid varandra (bild 5).

Ta högra remmen under huvudstöds infästning och samtidigt över vänstra remmen (bild 6). Lägg slutna krets på kroken och fastgör vid varandra (bild 7).

Så här blir ryggstödet ordentligt installerat och det börjar inte sjunka ner eller pressa sig mot huvudstödet handskruv (bild 8).



bild 1



bild 2



bild 3



bild 4



bild 5



bild 6



bild 7



bild 8

Specifications, general safety instructions & washing

Siiri shower chair with wheels, transport model 345310

Siiri shower chair with wheels, height-adjustable 345312 | 345312V | 345312W

Siiri shower chair XXL with wheels, height-adjustable 345412W

Siiri shower chair with wheels, tilting, height-adjustable 345315 | 345316 | 345315W | 345316W

Siiri shower wheelchair, independent model 345305 | 345300W | 345305W

Fitting of the fabric backrest

Read this manual carefully and follow the assembly instructions. Careful assembly guarantees safe use.

Do not use this equipment without first reading and understanding this instruction manual. If you are unable to understand the warnings, cautions and instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to install or use this equipment - otherwise, injury or damage may occur. Each individual should always consult with their physician or therapist to determine the best suited assistive aid for them and the proper adjustment and usage of it.

Watch assembly videos on YouTube:



*** Please note that the illustrations in this manual are only for guidance and may contain differences with the actual product.**

Specifications:

Intended use: Siiri shower chair with wheels is a handy help in shower rooms. The wheeled shower chair with hygienic seat is of high quality and meets the needs of both individuals and medical units. The high-quality polyurethane seat is wear-resistant and feels pleasant on the skin. The seat comes with a removable cover. Siiri can be placed in a smaller space thanks to the removable backrest. The armrests can be turned up and the footrests can be moved to the sides.

- Frame white painted aluminum (stainless)
- Seat, armrests and backrest black polyurethane
- Removable backrest and foldable armrests
- Height-adjustable footrests that turn to the sides and are easily removable
- Covered bidet opening
- Bedpan with lid and rails
- Lockable front and rear wheels
- CE-marked medical device



General safety instructions:

- ⚠ - Avoid putting your fingers or other parts of the body in places where they might get pinched
- ⚠ - Operating temperature between -30°C and 40°C (a shower chair that has been in a very hot or cold place should be handled carefully so as not to injure yourself)
- ⚠ - During passenger transport, the bedpan must be kept in place.
- ⚠ If the bedpan is missing, the lid may come off.
- Do not make structural adjustments or changes!
- ⚠ - Regularly check the general condition of the shower chair and the tightness of the fasteners. **A defective device must not be used. Don't try to fix it yourself but take it to a professional!**

Only original spare parts may be used for repair and maintenance in order for the CE approval of the device to remain valid.

Washing: The shower chair should be cleaned regularly with a mild detergent (PH 8-12) and wiped with a damp soft cloth. To remove difficult stains, it is recommended to use grease-dissolving cleaning agents. Alcohol-based disinfectants should be diluted in a ratio of 1:4. The shower chair can be placed under running water at low pressure or sprayed clean. Do not use harsh abrasive materials or bleach to avoid wear and tear and color fading. The seat part and the bedpan can be washed at 85 degrees for a maximum of 1 minute. Can be disinfected mechanically.

- ⚠ **Never use oily substances! The surface of the product becomes slippery and the grip does not hold!**

Siiri shower chair with wheels, transport model

- Front and rear wheels 125 x 30 mm
- Total width: 57 cm
- Total height: 100 cm
- Bidet opening size: 19.5 cm x 26.5 cm
- Seat size: 43 x 45 cm
- Seat height: 53 cm
- Seat width: 46 cm
- Weight: 13 kg
- User's max. weight: 180 kg



Commissioning:

Remove all parts of the product from the packaging.



fig. 1

Insert backrest into the tubes at the back of the frame, select appropriate height and tighten with the handwheels (fig. 1).

Installing the footrests: the top bracket of the footrest is pressed down into the frame tube so that the footboard is sideways to the frame (fig. 2).



fig. 2

Next, turn the footrest towards the center until it locks into place and makes a "click" sound (fig. 3).



fig. 3

Repeat with the other footrest.

The height of the footboards can be adjusted without tools by using the handwheels (fig. 4).



fig. 4

The footrests can be released and removed by pressing on the lever (fig. 5).



fig. 5

Siiri shower chair with wheels, height-adjustable

345312 | 345312V

- Front and rear wheels 125 x 30 mm
- Total width: 57 cm
- Total height: 99 cm - 105 cm
- Bidet opening size: 19.5 cm x 26.5 cm
- Seat size: 43 x 45 cm
- Seat height: 49 - 55 cm
- Seat width: 46 cm
- Weight: 13 kg
- User's max. weight: 150 kg

345312W

- Front and rear wheels 125 x 30 mm
- Total width: 66 cm
- Total height: 97 cm - 103 cm
- Bidet opening size: 19.5 cm x 26.5 cm
- Seat size: 56 x 42 cm
- Seat height: 49 - 54 cm
- Seat width: 57 cm
- Weight: 17 kg
- Max. user weight: 200 kg

Commissioning:

Remove all parts of the product from the packaging. Install the wheels into the legs of the chair, adjust to suitable height and lock with the quick-lock clip (fig. 1).



fig. 1

The chair has three height options (fig. 2).



fig. 2

NOTE! The top hole of the height adjustment tube must not be installed in the bottom hole of the frame (fig. 3).

For a higher seat height, a longer height adjustment tube is available as an accessory (see page 8).



fig. 3

Make sure that the clips are properly attached!

Alternatively, the package also includes mounting bolts for a more permanent installation of the wheels (fig. 4).

Insert backrest into the tubes at the back of the frame, select appropriate height and tighten with the handwheels (fig. 5).



fig. 4

Install the footrests (see pictures on the previous page): the top bracket of the footrest is pressed down into the frame tube so that the footboard is sideways to the frame. Turn the footrest towards the center until it locks into place and makes a "click" sound. Repeat with the other footrest. The height of the footboards can be adjusted without tools. The footrests can be released and removed by pressing on the lever.



fig. 5

Siiri shower chair XXL with wheels, height-adjustable

- Front and rear wheels 125 x 65 mm
- Double brake function that locks both the wheel and the swivel bearing
- Overall width: 71 cm
- Overall height: 95 cm - 100 cm
- Bidet opening size: 19 cm x 41 cm
- Seat size: 56 x 50 cm
- Seat height: 48 - 53 cm
- Seat width: 61.5 cm
- Weight: 19 kg
- Max. user weight: 270 kg



Assembly:

See the product "Siiri shower chair with wheels, height-adjustable" instruction page for instructions on installing the wheels, backrest and footrests.



fig. 1

NOTE! The top hole of the height adjustment tube must not be installed in the bottom hole of the frame (fig. 1). For a higher seat height, a longer height adjustment tube is available as an accessory.



The armrest is locked in the down position. To release and raise the armrest, pull the red knob (fig. 2).



fig. 2

When you want to use the armrest again, press the armrest down (fig. 3).

Make sure the armrest locks!



fig. 4

All four wheels are lockable with a double brake function. When the blue lever is pressed down, the wheel is locked. It is released by lifting the lever back up (fig. 4). **When getting off the chair and sitting in it, all four wheels should always be locked!**



fig. 3

Siiri shower chair with wheels, tilting, height-adjustable

345315 | 345316

- Front and rear wheels 125 x 30 mm
- Total width: 57 cm
- Total height: 100 cm - 106 cm
- Tilt angles: front 50° / back 30°
- Bidet opening size: 19 cm x 36 cm
- Seat size: 43 x 45 cm
- Seat height: 55 cm - 59 cm
- Seat width: 46 cm
- Weight: 14 kg
- User's max. weight: 130 kg

345315W | 345316W

- Front and rear wheels 125 x 30 mm
- Total width: 66 cm
- Total height: 100 cm - 106 cm
- Tilt angles: front 50° / back 30°
- Bidet opening size: 19 cm x 36 cm
- Seat size: 56 x 51 cm
- Seat height: 55 cm - 60 cm
- Seat width: 57 cm
- Weight: 19,5 kg
- User's max. weight: 200 kg

Commissioning:

See the product "Siiri shower chair with wheels, height-adjustable" instruction page for instructions on the wheels, backrest and footrests.

Insert the headrest into the black bracket in the middle of the push bar, set it to a suitable height and tighten with the handwheel (fig. 1 & 2).

The upper handwheel adjusts the distance of the headrest (fig. 3).

Tilting:

The tilt angle can be adjusted by using the handle found on the push bar (fig. 4).

Squeeze the handle: the hold releases and the tilt of the chair can be adjusted. Let go off the handle when the chair is in the desired position. The position locks.

⚠ If the user sits in the chair alone for a longer period of time, the wheels should be locked so that they point away from the product and thus give better support.



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4

Siiri shower wheelchair, independent model

345305, height-adjustable

- Rear wheels 24" polyurethane
- Front wheels 125 x 30 mm
- Total width: 65 cm
- Total height: 97 - 102 cm
- Bidet opening size: 19 cm x 36 cm
- Seat size: 43 x 45 cm
- Seat height: 49 - 55 cm
- Seat width: 46 cm
- Weight: 17 kg
- Max. user weight 130 kg

345300W | 345305W, height adj.

- Rear wheels 24" polyurethane
- Front wheels 125 x 30 mm
- Total width: 74 cm
- Total height: 100 cm | 97-102.5 cm
- Bidet opening size: 19 cm x 36 cm
- Seat size: 56 x 42 cm
- Seat height: 53 cm | 49-55 cm
- Seat width: 57 cm
- Weight: 18 kg
- Max. user weight: 200 kg

Commissioning:

Remove all parts of the product from the packaging. Insert backrest into the tubes at the back of the frame, select appropriate height and tighten with the handwheels (fig. 1).

Install the footrests (see detailed instructions on the instruction page of the product "Siiri shower chair with wheels, transport model").

Rear wheel brakes:

To lock the rear wheels, press the brake lever down until it clicks (fig. 2).

Height-adjustment of model 345305:

The height of the front wheel is adjusted by removing the quick release clip, selecting the desired height and attaching the quick release back in place (fig. 3 / page 22).

⚠ Make sure that the clips are properly attached!

Height adjustment of the rear wheels is done by changing the position of the axle (fig. 4-6).



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6

Fitting of the fabric backrest

The 345202 fabric mesh backrest available as an accessory can be installed on all standard Siiri shower chairs (models with a seat size of 43 x 45 cm) and 345202W on models 345312W and 345315W.

Start by removing the PU padding part from the backrest frame by unscrewing the 4 cross-headed screws.

Then place the mesh backrest on the frame of the backrest so that the buckles are on the backside of the chair and the lowest buckle strip goes under the armrests and the middle strip over them (the fabric backrest has recesses for the armrests).

Thread the other end of each of the three buckle strips through the buckle. Tighten to the desired position and fasten by pressing the Velcro straps together (fig. 1).

On the upper edge of the mesh backrest, there are two thinner fastening strips, which prevent the mesh backrest from sliding downwards.

With standard transport models and the independent Siiri, the straps are pulled crosswise and attached to the Velcro between the middle buckle strap (fig. 2).

Installation on the tiltable Siiri:

Place both straps hanging over the top of the push bar (fig. 3). Pull the left strap from under the headrest bracket (fig. 4). Place the Velcro loop area over the hook area and fasten together (fig. 5).

Pull the right strap from under the headrest bracket and over the left strap (fig. 6). Place the Velcro loop area over the hook area and fasten together (fig. 7).

When installed in this way, the backrest remains sufficiently taut and does not fall down or press against the handwheel of the headrest (fig. 8).



fig 1



fig 2



fig 3



fig 4



fig 5



fig 6



fig 7



fig 8

Accessories:

SUPPORT FOR AN AMPUTATED LEG

Product no.: 345 220 left 345 221 right



SAFETY BAR

Product no.: 345 210 / 345 210W



SOLE STRAP

Product no.: 345 223




SAFETY BELT

Product no.: 345 224



SEAT, FRONT EDGE CLOSED

Product no.: 345 218 / W / HD-12 / HD-15
incl. seat and cover

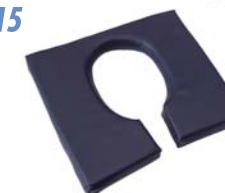

SEAT CUSHION WITH OPENING

Product no.: 345 227

LONGER ADJUSTMENT PIPE FOR WHEEL (+ 50 mm)

Product number: 345 145



SIDE SUPPORT

Product no.: 345 228



FALLING PROTECTION, a pair

Product no.: 345 208



TILTING ASSISTANCE for Siiri independent shower wheelchair

Product no.: 345 219



Item:	Product no.:
1 Height adjust. front/rear wheel (XXL)	345209(HD)
2 Complete footrest	345207
3 Footboard with rod	345207V
4 Bedpan	345211
5 Seathole cover	345213
6 Complete seat (EXW models XXL)	345214(W HD-12/-15)
7 Complete backrest with armrests	345215
8 Complete head support	345216
9 Gas spring (EXW)	345217(W)
10 Cable set for gas spring (incl. 2 x cable, 1 x brake lever + screws)	345222
11 Siiri independent, quick-locking 24" wheel & accessories	345203
12 Siiri independent, 24" rear wheel	345204
13 Front wheel 125 mm (no brake, old model)	345205E
14 Rear wheel 125 mm with brake	345206
15 Front wheel 125 mm with brake	345206E
16 Mesh backrest (EXW)	345202(W)



Symbolisanasto / Symboler / List of symbols:



Valmistaja
Tillverkare
Manufacturer



Katso käyttöohjeet
Se bruksanvisningen
See the user manual



Maahantuoja
Importör
Importer



Varoitus
Varning
Notice



Valmistusajankohta
Tillverkningsdatum
Date of manufacture



Lämpötilan raja-arvot
Temperaturgränsvärden
Limit values of
temperature



Yksilöllinen laitetunniste
Unik produktidentifiering
Unique Device
Identification



Säilytä kuivassa
Förvara på en torr plats
Store in a dry place



Sarjanumero
Serienummer
Serial number



Lääkinnällinen laite
Medicinteknisk produkt
Medical device



Vaatimustenmukaisuusmerkintä
Överensstämmelsemärkning
European Conformity

Ilmoittaminen vaaratilanteesta: Ammattimaisen käyttäjän on ilmoitettava Fimeaan ja valmistajalle vaaratilanteista, jotka ovat johtaneet tai olisivat saattaneet johtaa potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveyden vaarantumiseen ja jotka johtuvat terveydenhuollon laitteen:

- ominaisuuksista
- ei-toivotuista sivuvaikutuksista
- suorituskyvyn poikkeamasta tai häiriöstä
- riittämättömästä merkinnästä
- riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta
- muusta käyttöön liittyvästä syystä

Rapportering om tillbud: En yrkesmässig användare ska underrätta Fimea och tillverkaren om sådana tillbud förknippade med en medicinteknisk produkt som har eller kunde ha lett till att en patients, användares eller någon annan persons hälsa äventyras, och som beror på:

- produktens egenskaper,
- icke önskvärda biverkningar,
- en avvikelse eller störning i produktens prestanda,
- brister i märkningen av produkten,
- en bristfällig eller felaktig bruksanvisning för produkten,
- något annat skäl som hänför sig till användningen av produkten.

Incident reporting: Professional users must report to Fimea and the manufacturer incidents regarding situations that have or might have led to a risk to the health of the patient, user, or other person and that result from:

- the characteristics of the product
- malfunction or deterioration in performance
- insufficient labelling
- insufficient or incorrect instructions for use
- another reason related to the use of the product



Tukimet Oy
Kaivopuistontie 33
26100 RAUMA
FINLAND
www.tukimet.fi



Myynti:
tukimet@tukimet.fi
puh. +358 (0)2 677 4222