

Tekniset tiedot:

Käyttötarkoitus: Vapaasti seisova WC-korottaja avustaa käyttäjää WC-tiloissa asioimisessa. WC-tuolia voidaan käyttää roiskesuojan kanssa WC-istuimen päällä nostamaan istuinkorkeutta, joka helpottaa nousemista ja laskeutumista. Vaihtoehtoisesti WC-tuoliin voidaan vaihtaa roiskesuojan tilalle myös ämpäri (umpinainen alusastia), jolloin tuoli toimii erillisenä portatiivina, eikä käyttäjän tarvitse siirtyä WC-tiloihin asti. Käsinojat lisäävät turvallisuutta ja helpottavat myös ylös nousemista.

Vakiomallimme sisältää roiskesuojan mutta ei ämpäriä. Ämpäriin voi tilata joko lisävarusteena omalla tuotekoodillaan **326105** tai vaihtoehtoisesti valmiin tuotteen voi tilata roiskesuojan sijaan ämpäriin kanssa tuotekoodilla **326110S-5** (tavallinen malli) / **326110SL-5** (XL-malli).

- Korkeussäätö kätevilla pikalukoilla
- Integroitu kannen takatuki
- Muotonsa ansiosta helposti pinottava
- Renkaan ja kannen kiinnitys ilman työkaluja
- Kansi, rengas, roiskesuoja ja ämpäri muovia
- Runko ja jalat ruostesuojattua metallia
- Yksi jaloista on tasausjalka
- CE-merkitty lääkinällinen laite

- Istuin kannen koko: 39 x 39 cm
- Istuin renkaan koko: 36,5 x 37 cm
- Renkaan aukon koko: 23,5 x 28 cm



Tehty Suomessa



Vuokko vapaasti seisova WC-korottaja Tuotenumero: 326110S

- Istuinkorkeus: 46 cm - 60 cm
- Käsinojen väliin jäävä tila: 47 cm
- Käsinojen korkeus: 23 cm
- Kokonaisleveys: 61 cm
- Kokonaissyvyys: 50 cm
- Käyttäjän maksimipaino: 150 kg
- Paino: 5 kg

Vuokko vapaasti seisova WC-korottaja XL Tuotenumero: 326110SL

- Istuinkorkeus: 46 cm - 60 cm
- Käsinojen väliin jäävä tila: 61 cm
- Käsinojen korkeus: 23 cm
- Kokonaisleveys: 77 cm
- Kokonaissyvyys: 50 cm
- Käyttäjän maksimipaino: 250 kg
- Paino: 5,5 kg

Puhdistusohjeet:

WC-korottaja puhdistetaan pyyhkimällä kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Tuote voidaan myös suihkutella puhtaaksi. Vaikeiden tahrojen poistoon suositellaan käytettäväksi rasvaa liuottavia puhdistusaineita, ph-arvo 5-9 tai 70 % desinfiointiainetta.

Voidaan pestä ja desinfioida koneellisesti EN ISO 15883-7 standardin mukaisilla laitteilla.

Käyttöönotto:

Poista ensin tuotteen ympäriltä pakkausmateriaalit. Et tarvitse työkaluja asentaessasi korottajaa. WC-korottaja sopii useimpiin WC-istuihin malleihin.



Korkeuden säätäminen:

Irrota pikalukot runko-osan jaloista vetämällä pikalukkoa itseäsi kohde. Työnnä korkeudensäätö-jalka runko-osaan. Valitse sopiva korkeus ja lukitse korkeudensäätöjalka runkoon työntämällä pikalukko takaisin paikoilleen (kuva 1).

Varmista, että pikalukot ovat kunnolla kiinni ja että ne lävistävät kokonaan molemmat jalkojen putket.




Aseta korottaja wc-istuimen päälle. Tarkista, että korottaja on tukevasti paikoillaan.



Kallistuksen säätö:

Yksi tuotteen jaloista on kallistuksen säätöjalka, jossa ei ole lainkaan kumitulppaa ja jonka tassullista ruuvia kiertämällä voidaan tasata suihkutilan mahdollista kallistusta (kuva 2).

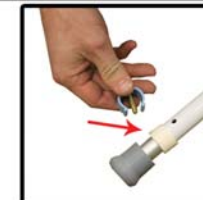

kuva 1



Tukeuduttaessa tuoliin on kohdistettava tasainen paino molemmille käsinojille kaatumisriskin minimoimiseksi!

Varaosaluettelo:

1	Ämpäri	1	326105
2	Kansi	1	V326110S-K
3	Rengas	1	V326110S-R
4	Roiskesuoja	1	V326100-3
5	Pikalukko	4	337595
6	Jalkasarja	1	337591
	(sis. tasausjalka	1	337594)
7	Kumitulppa	3	337593
8	Säätötassu	1	OMO1010
	tasausjalkaan		



Huolto-ohjeet:

Toimivuuden ja turvallisuuden takaamiseksi, huolehdi seuraavista toimenpiteistä:

Tarkista laitteen yleinen kunto säännöllisin väliajoin:

- Osien yleinen kunto: haljenneet tai vaurioituneet osat tulee vaihtaa uusiin.
- Kiinnikkeet ja/tai pikalukot: tarkista kunto ja vaihda uusiin, jos ne ovat vaurioituneet.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni: säädä tarvittaessa.

Jos käytön aikana havaitaan jotain poikkeavaa, laite tulee huollattaa välittömästi.



Korjauksissa ja huolloissa tulee käyttää vain alkuperäisvaraosia. Käyttämällä alkuperäisvaraosia varmistat CE-hyväksynnän sekä takuun voimassaolon.

Underhåll- och vårdanvisning

För att garantera funktionalitet och säkerhet, ta hand om följande steg:

Kontrollera apparatens allmänt skick regelbundet:

- Delarnas allmänna skick: spruckna eller skadade delar skall bytas ut.
- Fästelement och/eller snabbblås: Kontrollera skicket och byt ut ifall de är skadade.
- Kontrollera att alla delar är väl fast: justera vid behov.

Ifall något ovanligt upptäcks under användning, skall apparaten underhållas omedelbart.



Ursprungliga reservdelar skall användas i underhåll och reparationer. Ursprungliga reservdelar garanterar CE-märket och garantins giltighet.

Maintenance:

To ensure functionality and safety, take the following measures.

Check the general condition of the device at regular intervals:

- The general condition of the parts: cracked or damaged ones should be replaced with new ones.
- Fasteners and/or clips: check condition and replace if damaged.
- Check that all parts are properly fastened: adjust if necessary.



If something out of the ordinary is observed during use, the device should be serviced immediately.

CAUTION: Only original Tyke® spare parts may be used for repair and maintenance in order for the CE approval of the device to remain valid.

Yleiset turvallisuusohjeet:

- Vältä laittamasta sormeasi tai muita kehon osia paikkoihin, joissa ne saattavat jäädä puristuksiin.
- Käyttölämpötila välillä -30°C ja 40°C (käsittele hyvin kuumassa tai kylmässä paikassa ollutta laitetta varovasti niin, ettei loukkaa itseäsi)
- Älä tee rakenteellisia säätöjä tai muutoksia laitteeseen.
- Tarkista tuotteen yleiskunto sekä kiinnikkeiden kireys säännöllisin välein. Viallista laitetta ei saa käyttää. Huollata viallinen laite!



Ladattavat käyttöohjeet: www.tukimet.fi/ohjekirjat

Katso asennusvideot YouTube: 



Allmänna säkerhetsanvisningar:

- Undvik att sätta fingrar eller andra kroppdelar i platser där de kan klämmas fast
- Brukstemperatur -30°C och 40°C (Hantera varsamt produkt som har varit i riktigt kall eller het plats för att undvika skador)
- Gör inte ändringar i produktens struktur.
- Kolla produktens allmänna skick regelbundet och att den är ordentligt fastsatt. Felaktig produkt skall vårdas/repareras!



Nedladdningsbara bruksanvisningar:

www.tukimet.fi/ohjekirjat

Se installationsfilmer på YouTube: 



General safety instructions:

- Avoid putting your fingers or other parts of the body in places where they might get pinched
- Operating temperature between -30°C and 40°C (product that has been in a very hot or cold place should be handled carefully so as not to injure yourself)
- Do not make structural adjustments or changes!
- Regularly check the general condition of the product and the tightness of the fasteners. A defective device must not be used. Don't try to fix it yourself but take it to a professional!



Downloadable user manuals: www.tukimet.fi/ohjekirjat

Watch installation videos on YouTube: 

